

Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220

P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428 www.dharmanugraha.co.id

Jakarta, 26 Oktober 2023

Perihal: Undangan Pelatihan Cara Penggunaan Alat Pelindung Diri

Kepada Yth Direktur RS Dharma Nugraha Perawat, Karyawan dan IPCLN RS Dharma Nugraha Di Tempat

Dengan

Hormat,

Dengan ini kami mengundang, akan dilaksanakan pelatihan cara penggunaan alat pelindung diri RS Dharma Nugraha pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 28 Oktober 2023

Jam : 10.00 - Selesai Tempat : Ruang Rapat

Lantai Basemen

Agenda :

1. Pelatihan Cara Penggunaan dan Pelepasan APD

2. Demonstrasi Penggunaan dan Pelepasan APD

Dimohon kehadirannya untuk semua perawat , karyawan dan IPCLN PPI RS, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami, Ketua TIM PPI,

dr. Anugerah Ariestiany

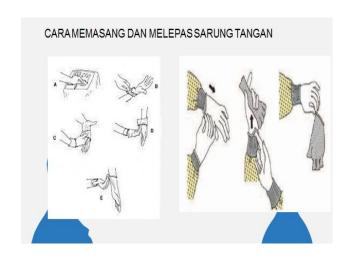












CARA MEMAKAI MASKER



 Genggamlah respirator dengan satu tangan, posisikan sisi depan bagian hidung pada ujung jari-jari anda, biarkan tali pengikat respirator menjuntai bebas dibawah tangan



 Letakan jari-jari kodua tangan anda datasa bagian hidung yang terbuat dari logam-richan sisi logam tersebut (guankan dua jari dari masing-masing tangan) mengkuti bentuk hidung anda-Jongan menekan rengirator dengan sata tangan karena dapat mengokolakhan respirator belorja



 Posisikan respirator dibawah dagu anda dan sisi untuk hidung berada diatas



 Tutup bagian depan respiratordengas kedua tangan, dan hati-hati aga posisi respirator tidak berubah

Tariklah tali pengikat respirator yang atas dan posisikan tali agak tinggi dibelakang kepala anda diatas telinga. Tariklah tali pengikat respirator yang bawah dan posisikan







TUTUP KEPALA Tujuan Mencegah jaluhny a giikroorganisme yang ada dirambut dan kulit kepala pelugas temadap ata-tala diayrah steril dan juga sebaliknya untuk melindung kepalahambut pelugas dari perdam bahan-bahan dari pasien





BUKTI FOTO PELATIHAN CARA PENGGUNAAN APD











ABSENSI PELATIHAN CARA PENGGUNAAN APD

Daftar Hadir

Tempat : lantai Baremen Perry Papat

Hari / Tanggal :

Acara : Panggunaan App

No	Nama	Bagian/Jabatan	Paraf
11.	Nastin.	Rebidanas	Ih
2	Sudarm	Por Us	1
3.	ALADIN	SATPAM	Alth
74.	man manmuni	Satpam	1
7	M. Zein	Security	la.
6.	Dian	CS	Solut
6. 7:3	Jehan	CS	Dyol -
3	Apris -	Telcons	efect a
7		AMM LANCE	pater
10	WIR	Laundry	sput
17	kus manto	Laundey	Istal
12	IsmanGil	Caundrey	Star
13	A Sayati	CS	Jul.
LY Y	Indah Puspitasari	Umum	Coul.
12	Indah purpkasan	POS 42.	Walc
16.	siri syaroh	6121	they.
13.	Pusmiati	612.	duy.
18	Dona Silva Zainal	6121	Zon
0)	Abdu		7
20	Bullet	A unbulance	199-
21 2)	Saroh Nurul Izah	Digital marketing Operatol	Ar.
3	Mroman ari sudani	Ol	19-
24.	Canh!	or.	Gu
	Tuh	OK.	CL_
26.	Chandra. P.OMON.	OK.	an
27	Bino	Finitery	E-
28	Febriaus A	\$'brfair	F-
29.	1 Bru Snything	De.	de l
30	A. HARY Hi	17 Support Adm / kasir	1110
2	Frman. J. Hutabarat	Have I pasir	4
22	tur	manager famel	50 .
32	Rocka & LILLah	Radioisyi	Jeji
35	Resta Ningrum	410	40.6

Daftar Hadir

: (antil' Barmont. Buang Rupat

Tempat Hari / Tanggal

Acara

No	Nama	Bagian/Jabatan	Paraf
36	Ríoma	Laborat	1-
37	Widya Astyli	La6	9
38	Delvinns	Lab	2
39	KISYANTINI	lab lab	1 De
40	Fara dilla Syah puta	Lab	Fr.
4	Agus the Nugrohe	lob.	AR
42	Paramita Aru	LAB	1 Km
43	dr. Pahrilla Kasmarih	LAB	1
45	Renika Bella Tania	Marketing	Brides
41		Pot blind	4.
47	Duspita. S	Po4 9191	1
48	gr. Devnita monto.	poliklinile	Melup
40	Zawansuch	Fernich	FR.
30	Erma yvanita	farmer.	P C
21	tola	Farmer	61
52	de Feras vui	160	1
53	fartati	TGD-	20
54	Rospiden Hosonan	pos 43	Graff.
ST,	25-30- Hosanai	Um CS	44=1
7	I WAN	ODIEL	G.57
8	ST TITEIYAH PAMAK	US	THE
60.	ahmad.	CS	£1.
	Kenedy	Teknisi	1
31.	Eughian.	Thui bi	17
1			
1			
+			
1			
1			
	1 1 1 2 1 2 1		
-			
- 1			-

NOTULEN PELATIHAN CARA PENGGUNAAN APD RS DHARMA NUGRAHA

Rapat : Pelatihan Cara Penggunaan APD

Hari / Tanggal : Sabtu 28 Oktober 2023

Waktu : 10:00 - Selesai

Tempat : Ruang Rapat Lantai Basemen

Hadir : Terlampir

Agenda Rapat : Pelatihan Cara Penggunaan Spill Kit

No	Pembahasan	Upaya Yang dilakukan	Penanggung Jawab
1.	Diklat/ pelatihan dilaksanakan sesuai jadwal diikuti 61 peserta diklat		
2.	Penyampaian materi oleh Zr.Upita Tentang: Pengertian apd, jenis apd, urutan cara pemakaian dan pelepasan apd dengan benar	Melakukan pelatihan cara penggunaan APD dengan benar	IPCD IPCN

	Demonstrasi Cara penggunaan apd dan pelepasan dengan benar	Memantau tiap perawat, IPCN/ IPCL dokter dan juga karyawan untuk menggunakan apd dengan benar
4	Peserta aktif dalam melakukan demontrasi penggunaan apd	
5	Selesai diklat jam 12.00	

Jakarta, 28 Oktober 2023 Ketua Tim PPI Mengetahui Direktur

dr. Anugerah Ariestiany

drg.Purwanti Aminingsih MARS, MPM, Ph.D