

Breezhaler yaitu alat untuk menghirup obat yang terdapat dalam kapsul transparan yang ditempatkan di dalam breezhaler dan terdapat tombol samping untuk menekan kapsul. Ketika obat dihirup melalui corong (mouthpiece) akan muncul bunyi seperti desing dan rasa manis, artinya obat sudah terhirup dengan benar.

Hal – hal yang harus diperhatikan ketika menggunakan breezhaler:

- Kapsul harus selalu disimpan dalam blister dan hanya dikeluarkan segera sebelum digunakan
- Hindari menghembuskan napas ke breezhaler untuk mencegah serbuk menjadi lembab dan mencegah serbuk tertipu dari mouthpiece breezhaler

CARA PENGGUNAAN BREEZHALER



CARA PENYIMPANAN

Simpan pada tempat sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya


CARA MEMBERSIHKAN

Usap “mouthpiece” bagian dalam dan luar dengan kain bersih, kering, dan tidak berbulu untuk menghilangkan sisa serbuk

CONTOH SEDIAAN

1. Ultibro® Breezhaler®
(Komposisi :
Glycopyrronium bromide dan Indacaterol maleat).
2. Onbrez® Breezhaler®
(Komposisi : Indacaterol maleat).

BAGIAN-BAGIAN

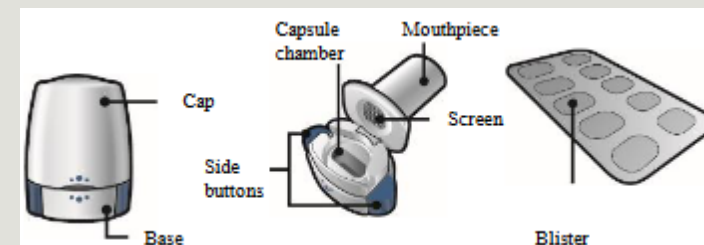


LANGKAH PENGGUNAAN

1




Buka penutup alat

2

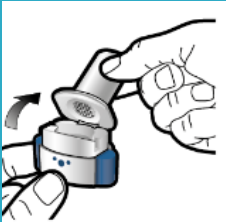

Buka breezhaler dengan cara: tahan bagian bawah inhaler dan buka pipa yang dimasukkan ke mulut ke arah samping, maka tempat untuk meletakkan kapsul akan terbuka

3

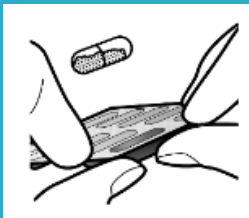

Siapkan kapsul obat

4



Masukkan kapsul ke dalam tempat kapsul

5




Tutup breezhaler sampai bunyi 'klik'

6



Pada bagian samping breezhaler (tombol penekan kapsul) tekan pada kedua sisi 1 kali hingga bunyi klik

7

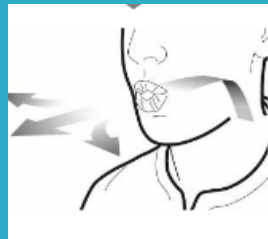


Buang napas dengan kuat

8





Masukkan inhaler ke dalam mulut dan tutup mulut rapat-rapat
Tarik napas dengan kuat sebisa mungkin

9

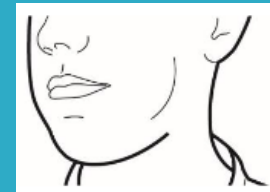


Setelah obat dihirup, maka tahan napas 5-10 detik, kemudian bernafaslah secara perlahan

10

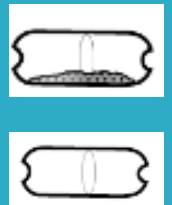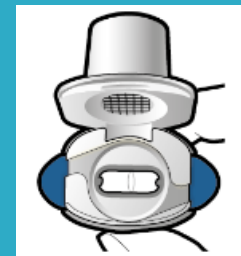

Periksa apakah kapsul sudah kosong, jika ada serbuk yang tertinggal di dalam kapsul: tutup breezhaler dan ulangi langkah 7-9

11

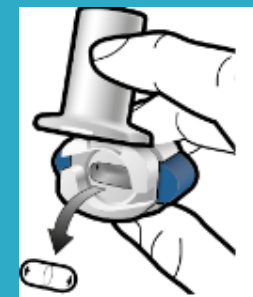

Buang kapsul kosong, tutup breezhealer dan penutup alat